

iridil®

GOCCE OCULARI
RINFRESCANTI E LENITIVE

*10 monodose sterili
da 0,5 ml richiudibili*

Iridil® gocce oculari si presenta in confezioni sterili, da 0,5 ml contenenti acqua distillata di hamamelis, camomilla, euphrasia, dalle proprietà rinfrescanti e lenitive e acqua distillata di malva dall'effetto antiarrosante e protettivo.


L'azione combinata di questi elementi naturali allevia l'arrossamento oculare dovuto a cause ambientali quali vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo, inquinamento, aria secca, salsedine, attività sportive ma anche da affaticamento visivo dovuto a numerose ore di studio e lavoro, eccessivo uso del computer ed esposizione alla luce.

Iridil® gocce oculari può essere utilizzato anche nei bambini.

Idoneo per l'utilizzo con lenti a contatto morbide o rigide indossate.

ISTRUZIONI D'USO

- Con le mani pulite aprire la busta di protezione.
- Staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 2-3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Il monodose, dopo la prima apertura, deve essere chiuso con l'apposito cappuccio e la soluzione rimasta all'interno del monodose potrà essere riutilizzata entro 12 ore.
- Ripetere, se necessario, l'operazione più volte al giorno.
- Il prodotto è utilizzabile da un solo paziente.
- Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione.

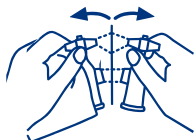

Si separa



Si apre



Si usa



Si richiude

COMPOSIZIONE

Acqua distillata di camomilla, acqua distillata di hamamelis, acqua distillata di euphrasia, acqua distillata di malva, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, disodio EDTA, acqua p.p.i. Senza conservanti.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Per l'uso nei bambini si consiglia di sentire il parere del pediatra.
- Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico esterno.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del monodose.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONE

10 monodose sterili da 0,5 ml richiudibili.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Il contenuto del monodose può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul monodose. Non separare il contenuto dalla confezione esterna e dal foglio illustrativo, allo scopo di avere tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo del prodotto.

 **Montefarmaco OTC SpA**
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)

 0051

**DISPOSITIVO
MEDICO**

STERILE	A
----------------	----------

Ultima revisione: 1 del 01/2021

01040210101

 **MONTEFARMACO**